

豆芽中 6-苄基腺嘌呤胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB096C01K

概要

6-苄基腺嘌呤(6-Benzylaminopurine)是广谱性植物生长调节激素，具有抑制植物叶内叶绿素、核酸、蛋白质的分解，保绿防老，将氨基酸、生长素、无机盐等向处理部位调运等多种效能，广泛用于提高茶叶、烟草的质量及产量，蔬菜、水果的保鲜和无根豆芽的培育。食用过多，会刺激食道、胃黏膜，造成损伤，出现恶心、呕吐等现象。

检测原理

本产品采用竞争抑制免疫层析的原理，样本中的 6-苄基腺嘌呤与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制抗体和试纸条中检测线(T 线)上抗原的结合，从而导致检测线颜色深浅的变化。而无论样本中是否含有待测物，质控线(C 线)都会显色，以示检测有效。

适用范围

本产品适用于新鲜豆芽样本中 6-苄基腺嘌呤残留的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763-2021。

检测限

0.01mg/kg (ppm)

试剂盒组成

序号	规格		10 次/盒	20 次/盒
	组成			
(1)	检测卡(内含滴管、干燥剂)		10份	20份
(2)	6-苄基腺嘌呤稀释液		1瓶	2瓶
(3)	20 mL刻度样品杯		1支	2支
(4)	说明书		1份	1份

注意事项

- 检测前处理样本的刀具、剪刀、粘板等工具应注意清洗，避免交叉污染。
- 样品要求：避免腐败变质样品；避免大块泥土（可以甩掉或用其他洁净物品擦除）。
- 检测前建议样品充分搅拌均匀（若取样少则应取代表性部位，再进行称样），这样检测结果才能更真实反应样品实际药物残留情况。
- 检测环境温度应控制在 20~30℃，温度过高或过低会影响检测结果。
- 请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。
- 待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。
- 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。
- 样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。
- 出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。
- 加标验证时，标液溶剂一般选择甲醇，最终样本加标量建议在 10-50 μL。
- 直接测试标准品时溶剂用试剂盒配套的提取液，有机溶剂加入量控制在 1%以内，自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明

- 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- 检测试剂盒需妥善保存请，放在儿童不易接触的地方。
- 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- 本产品为一次性产品，检测完毕后应妥善处理，实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。
- 本产品所涉及的试剂安全可靠，不含致癌性，剧毒、易燃、易爆、强腐蚀性的试剂，但不得食用。

贮藏条件及有效期

- 贮藏条件：2-30℃避光保存，勿冷冻。
- 有效期：12 个月。

豆芽中 6-苄基腺嘌呤胶体金快速检测卡操作步骤

需自备的工具



天平 (精度0.01g)



剪刀



镊子



离心管



移液器 (0.2mL、1mL)



涡旋仪




计时器

样本前处理步骤


(1) 检测前样品需恢复至室温 (20-30℃)，取适量豆芽根部，剪切为 0.3~0.5 厘米见方的碎片。



(2) 称取 2 g 样品于样品杯或 5mL 离心管中，加入 5mL 稀释液。

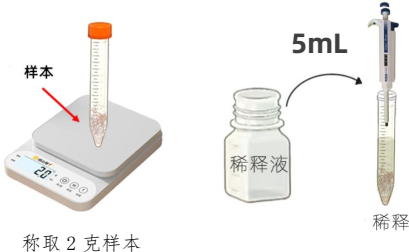


(3) 涡旋仪涡动或手动上下振摇 2 分钟，静置 1 分钟，得待测液。

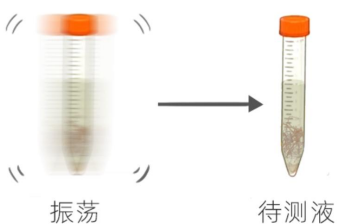


样本检测步骤

(1) 从原包装袋中取出检测卡和滴管，放于平整、洁净的台面上。

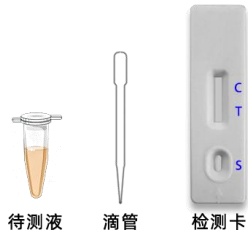


(2) 用移液器或滴管吸取 100 μL (约 3 滴) 待测液。

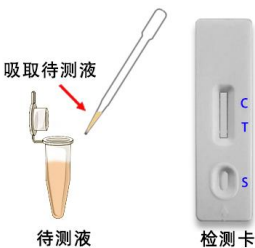


(3) 垂直滴加到检测卡的加样孔中；液体流动时开始计时，8~10 分钟进行结果判定，其他时间判定无效。




结果判断

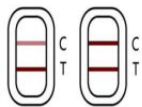

阴性

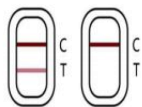

阳性

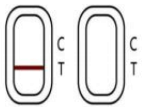

无效

目测：

阴性（未检出）：T 线颜色比 C 线颜色深或者一样深；

阳性（检出）：T 线颜色比 C 线浅或者 T 不显色；

无效：C 线不显色且无论 T 线是否显色。

仪器判读：详见仪器使用说明书